

Sothys Micro Dermobooster™.


- Sothys Micro Dermobooster™ behandlingsprotokoll p. 2 to 5
- Professionella produkter p. 6
- Behandlingsförberedelse p. 7 & 8
- **Beauty diagnosis** Sothys Micro Dermobooster™ treatment p. 9
- **Informationsmemo** Sothys Micro Dermobooster™ treatment p. 10
- **Follow-up during** the Sothys Micro Dermobooster™ treatment p. 11



Sothys Micro Dermobooster™.

Plumping-radiance regenerating treatment

Micro Dermobooster™-behandlingen är avsedd att utföras med Sothys® Micro Dermobooster™-maskinen eller andra maskiner som använder liknande tekniker tillsammans eller separat, och i enlighet med tillämpliga bestämmelser för en behandling enbart för estetiska (kosmetiska) ändamål ; Dessutom, eftersom mikronålningssteget i Micro Dermobooster™-behandlingen utvecklades och testades med spikar med en maximal längd på 0,35 mm och 0,45 mm, beroende på målområdena, användes alla andra maskiner än Sothys® Micro Dermobooster™-maskinen för att utföra Detta behandlingssteg får inte heller använda spikar, mikronålar eller något annat liknande element som överskrider dessa maximala längder.

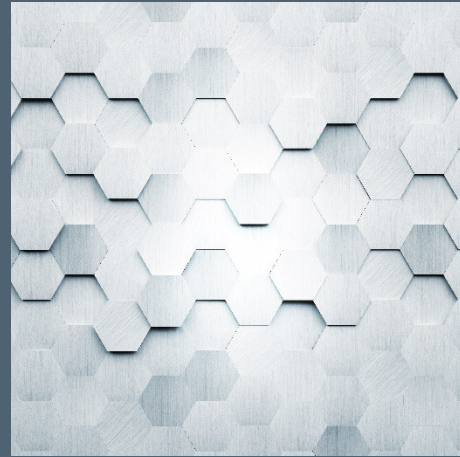

75 min



Finns i boxen	Produkter som behövs extra	Accessoarer
Radiance plumping microneedling solution	Eye and lip make-up removing fluid	Make-up removing wipes/bomullsrondeller
Regenerative ampoules	Cleansing duo	Mått
Moisturizing ampoule (1ml)	Purity lotion	Engångshandskar
Set of 6 Moisturizing ampoules (offered for home use)	Glysalac pro peel / AC pro peel (PRO)	
Dropper	Desquacrem forte microderm (CAB)	
20 behandlingar	Lämplig avslutande creme + solskydd	
	Alkosprit Soap	
	Hydroalcoholic product	
	Single-use towels	

FÖRBEREDELSE AV BEHANDLING

Innan du välkomnar klienten fortsätt till förberedelserna av behandlingen:
 Rengöring av händerna (se sidan 10)
 Sterilisera händerna med en hydroalkoholhaltig produkt (se sidan 11)

INNAN BEHANDLINGEN UTFÖRS

I förväg är det nödvändigt att utföra en huddiagnos på din kund för att vara säker på att detta protokoll verkligen kan ges och i förekommande fall rekommendera din kund att bekräfta med sin läkare/hudläkare att det inte finns några kontraindikationer mot de tar emot detta protokoll.

Sedan, med tanke på särdragen i detta protokoll, måste du informera dem om resultatet och få deras samtycke.

Se maskintillverkarens instruktioner;
det rekommenderas också att följa liknande hygien- och organisatoriska principer

STEP 1: CLEANSING

Eye and lip make-up
removing fluid

Rengörings duo

8 min

Ta bort smink från ögonen med Eyemakeupremover för att ta bort make-up från ögon och läppar, skölj sedan med kallt vatten för att ta bort eventuella rester. Rengör ansikte, hals och dekolletage med mjölk och lotion anpassad efter kundens hudtyp.

Upprepa handsteriliseringen och ta på dig engångshandskar.

STEP 2: PREPARING THE SKIN

20 min (steps A, B,
C)

Glysalac pro peel
eller

AC pro peel
1 spoon of 5ml

A) PEELINGFAS

Applicera produkten på ansikte och hals (undvik ögonkonturen).
Låt sitta i 5 minuter och skölj sedan väl.

Desquacrem forte
microderm

1 spoon of 1,25ml

B) DJUPRENGÖRING

Applicera produkten på fuktig hud i ansiktet och på halsen, undvik ögonkonturen. Utför en mekanisk skrubbing med cirkulära rörelser. Löddra sedan upp och skölj. Förnya dessa 2 STEG tills produkten är upplöst helt. Torka huden.

C) ESTETISK MIKRO DERMABRASION

Se maskintillverkarens instruktioner; justera maskinens inställningar, särskilt styrkan, i linje med tillverkarens rekommendationer och kundens känslighetsnivå.


Utför den estetiska mikrodermabrasionen på torr hud, arbeta med halva ansiktet åt gången, börjar från hakan och rör sig upp till pannan samtidigt som du undviker ögonkonturen. Utan att utöva påtryckningar, placera det berörda handstycket i en vinkel på 90° och flytta den i en rak linje,

se till att huden är spänd över det område som bearbetas.
Använd tillräckligt snabba rörelser.

Gå bara över varje område en gång enligt schemat.


Avsluta med att skölja huden med en bomullsrondell
indränkt i
Purity lotion. Torka huden.

Purity lotion

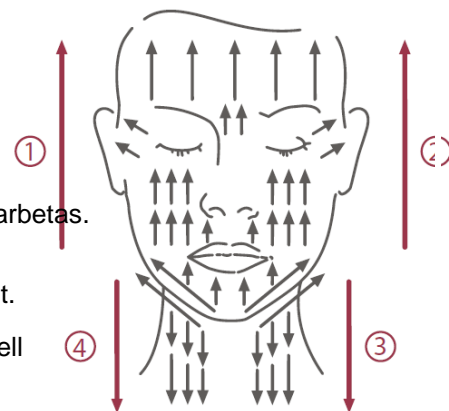

Se maskintillverkarens instruktioner;
det rekommenderas också att följa liknande hygien- och organisatoriska principer

STEP 3: COSMETIC MICRO NEEDLING

 25 min (steps A, B, C)

A) KOSMETISK MICRO NEEDLING (ANSIKTE, HALS, DÉCOLLETÉ)

Se maskintillverkarens instruktioner; dess nålar, mikronålar eller något annat liknande element får inte överstiga en längd av 0,35 mm

justera maskinens inställningar, särskilt styrkan, i linje med tillverkarens rekommendationer och kundens känslighetsnivå.

Följ protokollet nedan och följ riktlinjerna och rekommendationerna från tillverkaren av den berörda maskinen.

Utför den kosmetiska microneedling på halva ansiktet åt gången, börja från hakan och flytta upp till pannan samtidigt som du undviker ögonkonturen, svullnader och de ömtåliga områdena i ansiktet.

Utän att utöva tryck, placera handstycket i en vinkel på 90° och flytta det i en rak linje, se till att huden är spänd över det område som bearbetas.
Använd långsamma rörelser.

På pannan, använd korta linjer eftersom huden är känsligare i detta område. På halsen, flytta handstycket nedåt, men uppåt för äldre hud.

Vid behov på dekolletage, flytta handstycket mot axlarna.

Gå bara över varje område en gång för vart och ett av de två följande stegen, enligt schemat

Fortsätt med två steg:


Vid känslig hud, applicera inte det berörda handstycket på torr hud och gå direkt till steg 2

Använd först handstycket i fråga på torr hud med långsamma rörelser

2. Använd dropparen som medföljer i kartongen, mät upp 5 ml Radiance plumping Microneedling lösning applicera sedan med en svepande rörelse i ansikte, hals och dekolletage om nödvändigt.

Använd sedan det aktuella handstycket snabbare rörelser.

Radiance plumping
Microneedling solution
A dropper of 5ml

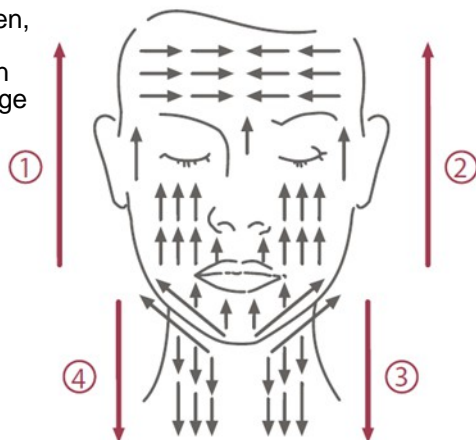

STEP 3: COSMETIC MICRO NEEDLING

KOSMETISK MICRONEEDLING FÖR MÅLADE OMRÅDEN (DEFINIERADE RYNKOR, MÖRKA FLÄCKAR)

Se maskintillverkarens instruktioner; dess spikar, mikronålar eller något annat liknande element får inte överstiga en längd av 0,45 mm; justera maskinens inställningar, särskilt kraften, i linje med tillverkarens rekommendationer och kundens känslighetsnivå

Följ protokollet nedan och följ riktlinjerna och rekommendationerna från tillverkaren av den berörda maskinen.


Placera det berörda handstycket i en vinkel på 90° på huden och tryck lätt när du flyttar in den en rak linje längs rynkor eller applicera ett spetsigt t till mörka fläckar.

Gå över varje rynka 5 till 10 gånger (10 gånger för djupa rynkor).

C) REGENERATIVE AMPOULES

Regenerative ampoule

Applicera en regenerativ ampull på hela ansiktet, halsen och dekolletage, med svepande rörelser tills det absorberas i huden. till mörka fläckar.

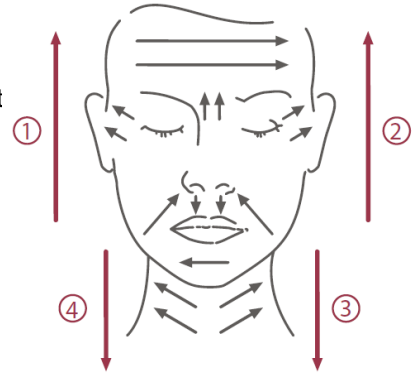

STEP 4: MODELLING


Regenerative solution

3,75ml or one spoon of 1,25ml and one spoon of 2,5ml

Se maskintillverkarens instruktioner; justera maskinens inställningar, särskilt styrkan, i linje med tillverkarens rekommendationer och klientens känslighetsnivå.

Applicera den regenerativa lösningen.

Flytta det berörda handstycket längs hudmusklerna. Gå fram och tillbaka 3 gånger på varje område enligt schemat:

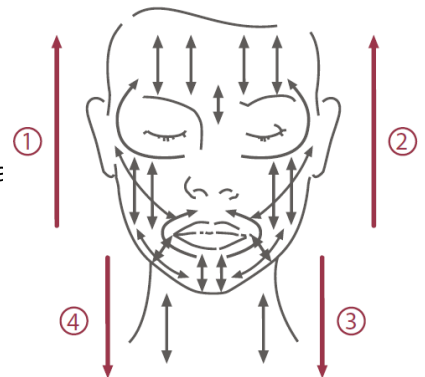

 10 min

STEP 5: END OF TREATMENT

Moisturizing ampoule

1ml

 2 min

Applicera 1 ml fuktgivande ampull och undvik ögonkonturen. Applicera sedan kräm som passar din hudtyp. Lägga sedan på solskydd.

HOME PROTOCOL

Set of 6 Moisturizing ampoules

Ge kunden sitt set med 6 fuktgivande ampuller och rekommenderar att du använder en ampull på morgonen och kvällen före deras vanliga serum och/eller kräm i 3 dagar efter sessionen.

Efter protokollet, följ tillverkarens rekommendationer för att garantera en hög nivå av hygien och säkerhet.

Fyll i formuläret: Uppföljning

Professionella produkter **BEHANDLINGS BOX**

STEP 3: COSMETIC MICRONEEDLING

Radiance plumping microneedling solution



KONSISTENS: f luid gel **DOFTFRI**

NYCKELINGREDIENS

VERKAN

Hög Molekylär Vikt hyaluronsyra

Anti-uttorkningsköld och vattentank på huden
Den bildar en icke-ocklusiv film och kan behålla upp till 1000 gånger sin vikt i vatten

Hydra plumping komplex

Blandning av viktiga hydratiseringsmolekyler: NMF-komponenter och hyaluronsyra
Dessa viktiga komponenter som finns naturligt i huden, fyller och skyddar huden och jämnar ut rynkor

Allantoin

Produkt med lugnande och mjukgörande egenskaper

Adenosin Triphosphate

Adenosine Triphosphate = ATP

STEP 3: COSMETIC MICRONEEDLING

Regenerative ampoules



1,5ml
x20

Konsistens: vattnig lösning

Doftfri

GF Tripeptides 2%

*För att bidra med en exogen hudtillväxtfaktor analog: Biomimetisk tripeptid som aktiverar produktionen av DEJ- och ECM-proteinerna: laminin, kollagen I och III, fibronektin
Bidrar till att öka vävnadsförnyelsen och hjälper till att återställa hudens struktur och fasthet*

För omstrukturerad hud

Glyco-Repair™ 3%
(Frö från johannesbröd ex Rik på oligogalactomannans)



*För att öka endogena tillväxtfaktorer: Reglerar epidermala och dermala tillväxtfaktorer, hjälper till med naturlig regenerering av mikrolesioner i huden
Accelererar kapaciteten hos hud som försvagats av aggression
För högkvalitativ reparation av vävnader*

Potenrikt glycerin

Återfuktande, mjukgörande

STEP 5: END OF PROTOCOL

Moisturizing ampoule

Konsistens: vattnig konsistens som snabbt observeras av huden
Doft: fräsch, blommig, träig

Omedelbart ultra-moisturizing komplex

(glycerine, sodium PCA, trehalose, sodium hyaluronate och Polyquaternium-51)

Blötlägger corneocytes och stratum corneum i fukt.

Pro ampull
1ml glas x20

Box av 6 ampuller
1ml plast
För hemmabruk
x20



TM Treatment preparation

RECOMMENDATION OF HYGIENE PRODUCTS

- **Disinfectant detergent:** cleans and disinfects surfaces and furniture as well as the accessories that will be in contact with the client.
- **Soap:** to wash hands
- **Hydroalcoholic product:** antiseptic which allows to sanitize the hands.

CLEANING AND STERILIZING THE HANDS

1. Cleaning the hands:



01. Wet the hands and forearms using warm water



02. Apply a dose of soap to the palm of your hands



03. Rub your hands together for at least 30 seconds to create foam



04. Soap the forearms well



05. Rub the backs of the hands and the spaces between the fingers



06. Clean the nails in the palm of your hand



07. Soap the wrists



08. Rinse thoroughly under running water



09. Dry the hands and the forearms using a disposable paper towel



10. Turn off the tap using the paper towel

CLEANING AND STERILIZING THE HANDS

2. Sterilizing the hands using an hydroalcoholic product



01. Pump once or twice into the palm of the hand without adding water



02. Spread the product across the surface of the hands for 15 seconds



03. Rub the back of each hand using the palm of the other hand, interweaving the fingers



04. Rub the tips of the fingers on each hand in the palm of the other hand



05. Continue rubbing until the hands are dry. Do not wipe the hands.

Beauty diagnosis

Micro Dermobooster™ protocol

CONTACT INFORMATION(1)

Surname: _____ First name: _____ Date of birth: _____
 Tel: _____ Email: _____

SKIN CHARACTERISTICS

- Skin type: Dry Combination Oily
- Sensitivity: slight sensitivity, please specify the area: _____ Very sensitive** Reactive**
- Any evidence of couperosis (redness, visible blood vessels): yes no, if yes, please specify the area to be excluded: _____
- Any evidence of rosacea (redness, visible blood vessels, papulopustular lesions): yes no, if yes, please specify the area to be excluded: _____
- Any evidence of angioma: yes no, if yes, please specify the area to be excluded: _____
- Thin skin: yes* no

ADDITIONAL INFORMATION

- Overall condition: Good Tired / Stressed, specify intensity on a scale of 1 to 10: _____
- Pregnant : yes* no
- Skin allergies: yes no → if yes please specify _____
- Dermatoses on the face: yes* no → if yes please specify _____
- Prone to cold sores on the mouth: yes no
- Ongoing dermatological medical treatment (Preparation or drug with vitamin A, vitamin C preparation(ascorbic acid), azelaic acid, cortisone cream): yes* no → if yes please specify _____
- Medical treatment: Anti-inf lammatory2** Anti-coagulant3**

RECENT EXPOSURE THAT MAY PREVENT PROTOCOL

- Have you waxed/shaved the area of skin to be treated in the last 24 hours? yes no
- Have you exposed the area of skin to be treated to intense UV light or the sun in the last 24 hours? yes no
- Have you exposed the area of skin to be treated to extreme weather conditions (cold, wind, sun, etc.) in the last 24 hours? yes no
- On the area of skin to be treated, have you had:
 - A home peel treatment in the last 24 hours? yes no
 - An aesthetic peel treatment in the last week? yes no
 - A medical peel treatment in the last month? yes* no
- Recent surgeries (in the last month) in the treatment area: injections, surgical interventions, implants... yes** no

(1)Personal data:

The data collected for this diagnosis will be processed by the beauty institute whose stamp appears below, and has been put in place in order to facilitate the progress and monitoring of the Micro Dermobooster™ machine protocol. The information will be kept for the duration of these processes, or as specifically indicated in applicable regulations. In accordance with applicable regulations, you have the right to access, amend, oppose, delete or transfer any of your personal data. You can exercise this right by contacting the beauty institute whose stamp is shown below. You can also at any time withdraw your consent to the collection and processing of your personal data.

*** By completing this skin diagnosis, you agree that the information collected will be used by your beautician specifically in this context.

INSTITUTE
STAMP

In: _____
 On: _____
 Signature: _____

(2) Examples: aspirin (Kardegic®), ibuprofen
 (3) Examples: acenocoumarol (Sintrom®); flindione (Previscan®); warfarin (Coumadine®); Rivaroxaban (Xarelto®); Dabigatran (Pradaxa®); heparin and derivatives (type Lovenox®, Innohep®)
 * Please seek medical advice ** Do not perform the treatment *** please check the box to give your consent

Information memo

Sothys Micro Dermobooster™ behandling

Kära herr eller fru,

Du kommer att ge din kund ett Sothys-protokoll med Micro Dermobooster™-maskinen eller en eller flera maskiner som använder liknande tekniker.

I förväg är det nödvändigt att utföra en huddiagnos på din kund för att vara säker på att detta protokoll verkligen kan ges och i förekommande fall rekommendera din kund att bekräfta med sin läkare/hudläkare att det inte finns några kontraindikationer mot de tar emot detta protokoll.

Sedan, med tanke på särdragen i detta protokoll, måste du informera dem om resultatet och få deras samtycke.

Här är informationen som vi rekommenderar att du uppmärksammar din kund på:

1. MICRO DERMOBOOSTER™ BEHANDLINGSPROTOKOLLPROCESS

Protokollet innehåller fyra huvudfaser:

Förberedelse av huden med estetisk mikrodermabrasion ("Peel"-funktion hos Micro Dermobooster™-maskinen eller liknande funktion hos någon annan maskin); Kosmetisk microneedling ("Micro L"-funktion på Micro Dermobooster™-maskinen eller liknande funktion på någon annan maskin); Kosmetisk microneedling ("Micro S"-funktion på Micro Dermobooster™-maskinen eller liknande funktion på någon annan maskin); Mekanisk modellering ("Modelleringsfunktion" för Micro Dermobooster™-maskinen eller liknande funktion för någon annan maskin).

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ATT VIDTA FÖRE PROTOKOLLET

Dagen före och dagen för protokollet, undvik all hårborttagning, rakning, peeling, intensiv exponering för solen eller solarie, exponering för extrema klimatförhållanden.

3. REKOMMENDATIONER EFTER PROTOKOLL

Använd 1 Sothys fuktgivande ampull morgon och kväll i tre dagar efter sessionen (set med sex Sothys ampuller ges efter protokollet).

Använd inte peeling eller genomgå någon annan skönhetsbehandling (på ett skönhetsinstitut eller vårdcentral) under de sju dagarna efter sessionen.

Använd inte bastu eller ångbad inom 48 timmar efter behandlingen.

Undvik exponering för solen, ett solarium eller extrema klimatförhållanden under de 48 timmarna efter sessionen.

Använd sedan solkräm under de kommande 48 timmarna och efter det mellan varje protokollsession om kunden har flera sessioner.

Det är viktigt att följa instruktionerna för den berörda (Sothys eller annan) Micro Dermobooster™-maskinen eller vilken annan maskin som helst och att du strikt följer varje steg i Sothys-protokollet och följer instruktionerna och rekommendationerna.

Under och efter protokollet kan huden bli rodnad och kunden kan känna en lätt värmekänsla (Peeling-fas och/eller estetisk mikrodermabrasion). Detta är helt normalt och försvinner i de flesta fall i slutet av protokollet. Det kan dock kvarstå i 24 timmar. Så länge du strikt följer våra rekommendationer bör protokollet inte orsaka några andra besvär.

Men med tanke på de olika fallen, teoretiskt och särskilt om ordinationerna i behandlingsprotokollet inte har varit korrekt, kan den lokala förekomsten av spår av repor eller sårskorpor (stadier av kosmetisk mikronålning) inte uteslutas; i detta fall är det ditt ansvar att stoppa protokollet.

Vi rekommenderar att du ber din kund att informera dig om varje incident (oönskad händelse) som inträffar efter protokollet och vid behov råder dem att rådfråga sin läkare/hudläkare.

DATE OF PROTOCOL 1:

Skin condition during the session:
 Normal
 Redness → areas
 Burning sensations → areas
 Tingling → areas
 Other, please give details:
→ Areas

How the client felt during the session:
 Good Sensitive

Any more comments:

If necessary, please note any changes to be made during the next session:

Medical advice to be asked for:
 Yes No

Products recommended for use at home after the protocol:

DATE OF PROTOCOL 2:

Skin condition during the session:
 Normal
 Redness → areas
 Burning sensations → areas
 Tingling → areas
 Other, please give details:
→ Areas

How the client felt during the session:
 Good Sensitive

Any more comments:

If necessary, please note any changes to be made during the next session:

Medical advice to be asked for:
 Yes No

Products recommended for use at home if different from protocol 1:

DATE OF PROTOCOL 3:

Skin condition during the session:
 Normal
 Redness → areas
 Burning sensations → areas
 Tingling → areas
 Other, please give details:
→ Areas

How the client felt during the session:
 Good Sensitive

Any more comments:

If necessary, please note any changes to be made during the next session:

Medical advice to be asked for:
 Yes No

Products recommended for use at home after the protocol: